




- ✓ Wirksame Linderung bei allergischer Rhinitis (z.B. laufende Nase und Niesen)
- ✓ Medikamentenfrei: Rot- und Infrarotlichttherapie
- ✓ Kurze Anwendungszeit: 3 Minuten

Breathe  
**EASY**



Original Größe

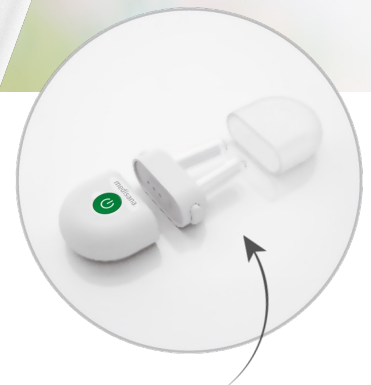

Magnetische Nasenklammer  
für einfachen Austausch

## Medinose Compact Nasentherapiegerät

Art.-Nr. 45055 | EAN 40 15588 45055 6

### FUNKTION | ANWENDUNG

- Kabelloses und leichtes Design
- Praktische Ein-Knopf-Bedienung
- Mit Schutzhülle und Kappe
- Inklusive Batterien
- Zertifiziertes Medizinprodukt

### TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 7 x 3,9 x 1,7 cm
- Gewicht: ca. 21 g
- Wellenlänge: 652 & 940 nm
- Infrarot- und Rotlicht
- Lichtintensität:  
3 mW – 6 mW pro Nasenloch
- Anzahl der Anwendungen  
(volle Batterien): 30 Anwendungen
- Dauer der Anwendung: 3 Minuten
- Batterien: 2 x CR2032-Batterien

### PACKUNGSINHALT

- Medinose Compact  
Nasentherapiegerät
- 1 x Nasenklammer
- 2 x CR2032 Batterien
- Schutzkappe
- Gebrauchsanweisung

### WIRKWEISE

**Entzündungshemmend:** Infrarotlicht reduziert Entzündungen und fördert die Durchblutung der Nase.

**Allergiehemmung:** Hemmt die Histaminausschüttung und lindert allergische Symptome wie Juckreiz und Niesen.



Anwendung: Führen Sie die Nasensonde in die Nase ein und drücken Sie auf Start.

### LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung  
1 Stück | 7,5 x 3,3 x 10,6 cm | 0,08 kg  
VPE

4 Stück | 14,5 x 8,2 x 14 cm | 0,35 kg